

ANALISADOR SÓLIDOS TOTAIS & UMIDADE/VOLÁTEIS

permite analisar qualquer tipo de amostra desde 0,01 a 99,99%
tempo de análise com resultado final menor que 2 minutos
não requer curva de calibração para efetuar análises




Opcional

Permite Up Grade para teste de GORDURA em 8 seg.
Sem recalibrações.(validação AOAC)

Opcional

Software para obter rapidamente umidade, gordura e proteína em carnes e pré-misturas.
Sem curva de calibração.

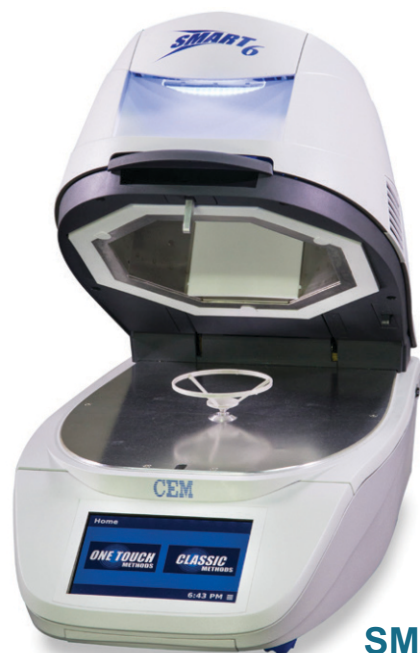

SMART 6

AMOSTRA	SMART 6		IR		ESTUFA	
	TEMPO (s)	DESVIO	TEMPO (s)	DESVIO	TEMPO (h)	DESVIO
QUEIJO	120	0.12	1200	0.20	5	0.09
PLÁSTICO PELETIZADO	300	0.003	1500	0.003	4	0.001
LEITE EM PÓ	75	0.06	560	0.10	5	0.02
LATEX	60	0.05	720	0.07	2.5	0.03
MOLHO DE SALADA	110	0.02	900	0.03	5	0.01

(s) = segundos

(h) = horas

Abril/ 2016



vendas@autoanalitica.com.br
11-2126-2886
www.autoanalitica.com.br