




EXTRAÇÕES EM 10 MINUTOS

(clean up + filtração + resfriamento + coleta dos extratos)

EDGE - Extraction System

O NOVO JEITO DE PREPARAR AMOSTRAS

SOLVENTE PRESSURIZADO E FASE SÓLIDA DISPERSIVA

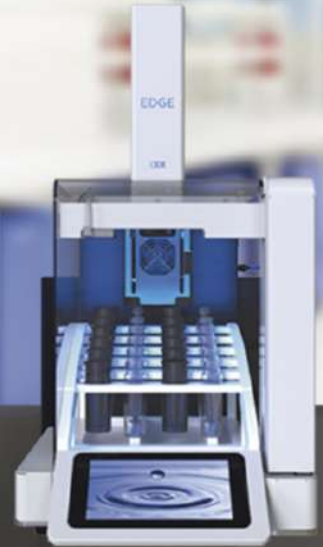

Para posterior análise de pesticidas e contaminantes orgânicos por GC-MS e HPLC-MS

Trocador automático & coleta de extratos com rack para 12 amostras

Temperatura operacional de extração: amb a 200°C

Cela de extração (Q-cup): 90 mLs - volume total

Permite instalar até 6 tipos de solvente extrator (apenas 20 a 30 mLs por amostra)

Agilizando os métodos: QuEChERS, Soxhlet, Ultrassom etc.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES E AMOSTRAS



**PLÁSTICOS, POLÍMEROS
TEXTEIS**
Extração de aditivos.



**IND FARMACÊUTICA
COSMÉTICA**
Extração de princípio ativo.



ALIMENTOS EM GERAL
Extração de pesticidas
e outros contaminantes
segundo a AOAC.



**CELULOSE, MADEIRA
SERRAGEM**
Extrativos em geral.



MEIO AMBIENTE
Extração de contaminantes
orgânicos (USEPA)

☎ 11-2126-2886 ☎ 11-95302-1974 ✉ comercial@superlab91.net

🌐 www.superlab.com.br 🌐 www.linkedin.com/company/superlabltda

