

DIGESTOR SEQUENCIAL DISCOVER SP-D

VIA MICRO-ONDAS FOCALIZADO

AUTOMATIZADO COM TROCADOR DE AMOSTRAS (24 POSIÇÕES)



- Digestão em apenas 10 minutos (incluindo o tempo de resfriamento).
- Tubos de digestão de 80 mL (quartzo e teflon).
- Tecnologia ActiVent® controle automático da pressão nos tubos.
- Excelente para usuários com vários tipos de amostras.
- Resfriamento acelerado no final do processo.
- Programação de método individual para cada amostra.
- Controle & Registro da temperatura durante todo o processo.
- O volume de ácido é de apenas 0,5 a 10mL (cerca de 10 a 20 vezes menos que as técnicas convencionais).
- A amostra está em constante agitação no tubo, melhorando a eficiência do processo.
- Fechamento / Abertura automatizada do tubo de digestão.

Pesar, Clicar, & Digerir

1

Pese sua amostra e adicione ácido




2

Encaixe a tampa e coloque o tubo no auto sampler



3

Carregue o método e pressione Start

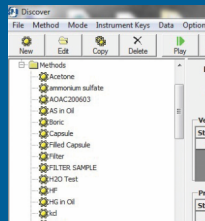

4

Tenha sua amostra completamente digerida



02-2018



superlab

vendas@autoanalitica.com.br

11-2126-2886

www.superlab.com.br